


Einführung

Mit der zusammenklappbaren Compact 6 HD Speech Dockingstation können Sie ganz bequem einen Schnappschuss von einer ganzen Seite durchführen. Der Compact 6 HD Speech liest Ihnen die Texte von der Seite vor.

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Bodenplatte | 5. USB-Anschluss |
| 2. Ständer | 6. Lautsprecher |
| 3. Compact 6 HD Speech Docking-Plattform | 7. Lautsprecher Ein / Aus-Schalter |
| 4. Ausschnitt für Kamera und Beleuchtung | |

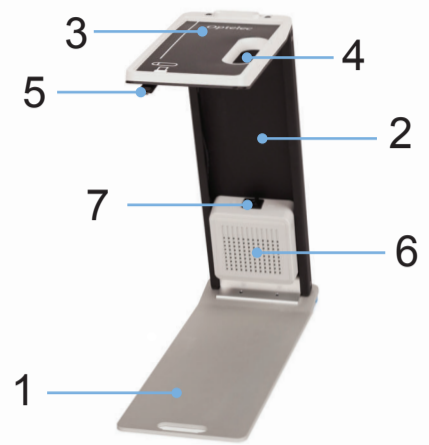

Aufstellen der Speech Dock



Halten Sie den Ständer und die Docking-Plattform mit einer Hand und die Bodenplatte mit der anderen Hand fest.



Heben Sie den Ständer mit Docking-Plattform an und klappen beides von der Bodenplatte weg bis die Verriegelung einrastet.



Ziehen Sie die Docking-Plattform nach oben in eine horizontale Position.



Drücken Sie die Docking-Plattform vorsichtig in den Ständer, um sie zu sichern.

Zuklappen der Speech Dock



Heben Sie die Docking-Plattform vorsichtig um ca. 1 cm an, um sie vom Ständer zu entriegeln.



Führen Sie die Docking-Plattform in eine vertikale Position.



Halten Sie die Docking-Plattform mit Ständer in einer Hand und heben Sie sie zum Entriegeln von der Bodenplatte vorsichtig um ca. 1 cm an.



Docking-Plattform und Ständer drücken Sie nun zum Zusammenlegen nach unten und erhalten so wieder eine kompakte Einheit.

Verwenden des Compact 6 HD mit der Speech Dock



Stellen Sie die SpeechDock mit dem Ständer nach hinten zeigend vor sich auf.



Legen Sie den Compact 6 HD Speech mit dem Bildschirm nach oben auf die Speech Dock.



Der Compact 6 HD Speech ist korrekt platziert, wenn die Kamera und die Beleuchtung mit der dafür vorgesehenen Aussparung der Docking-Plattform übereinstimmen.



Die weiße Scan-Taste und der USB-Anschluss sollten zu Ihnen zeigen.

Dokumente positionieren



Um ein Dokument richtig zu positionieren, vergewissern Sie sich, dass es im Hochformat ausgerichtet ist.

Richten Sie die untere linke Ecke des Dokuments an der unteren linken Ecke der Bodenplatte aus.

Das Dokument sollte flach auf der Bodenplatte liegen und nicht auf den nach oben geneigten Teil der Bodenplatte gelegt werden.

Bei korrekter Platzierung kann der Compact 6 HD Speech eine ganze Seite im Hochformat erkennen.

Speech Dock anschließen



Stecken Sie das USB-Kabel der Speech Dock in den Compact 6 HD Speech USB-Anschluss, um den Compact 6 HD Speech aufzuladen sowie den Lautsprecher anzuschließen.



Stecken Sie den USB-Stecker des Compact 6 HD USB-Ladegerätes in die USB-Ladebuchse des Ständers.

Lautsprecher "Ein" / Aufladen

Wenn der Lautsprecher eingeschaltet und das Audiokabel angeschlossen ist, hören Sie den Text automatisch vom Lautsprecher der SpeechDock.

Wenn der Lautsprecher ausgeschaltet ist, wird der Compact 6 HD Speech geladen.

Der Compact 6 HD Speech lädt nicht, wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist.

Vorsicht

Optelec haftet nicht für andere als die in diesem Handbuch beschriebenen Anwendungen dieses Geräts. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf.

- Reinigen Sie die Speech-Dockingstation nur mit einem weichen Reinigungstuch.
- Vermeiden Sie aggressives reinigen und aggressive Reinigungsmittel.
- Stellen Sie die Speech-Dockingstation nicht auf eine instabile oder unebene Fläche.
- Verwenden oder lagern Sie die Speech-Dockingstation nicht in feuchten oder heißen Umgebungen.
- Verwenden oder lagern Sie die Speech-Dockingstation nicht unter 0 ° oder über 40 °.
- Setzen Sie die Speech-Dockingstation keiner übermäßigen Hitze oder direktem Sonnenlicht aus.
- Verwenden Sie die Speech-Dockingstation nicht in Wasser.
- Kontakt mit ätzenden Flüssigkeiten vermeiden.
- Lassen Sie die Speech-Dockingstation nicht fallen und vermeiden Sie Stöße.
- Verwenden Sie das Compact 6 HD-Ladegerät nur, um die Speech-Dockingstation zu betreiben.

Risiken und Nebenwirkungen: Keine bekannt

Spezifikationen

- Klappbares Design - für kompakte Lagerung / Transport
- Abmessungen im zusammengeklappten Zustand: 375 x 124 x 44 mm
- Abmessungen im aufgestelltem Zustand: 370 x 124 x 365 mm
- Gewicht: 1.28 kg