


Introducción

El accesorio plegable Compact 6 HD Speech Dock permite capturar una página entera para que Compact 6 HD Speech lea el texto de la misma.

1. Base
2. Panel posterior
3. Plataforma de acoplamiento
4. Ranura para cámara y luces
5. Conexión USB
6. Altavoz
7. Botón de Activar/desactivar altavoz

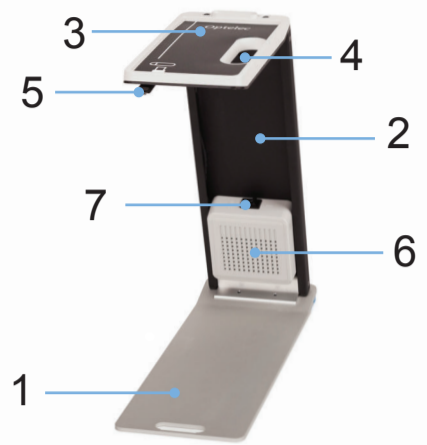

Desplegar el Speech Dock



Sostenga el panel posterior y la Plataforma de acoplamiento con una mano y la Base con la otra.



Levante y despliegue el Panel posterior hasta colocarlo en posición vertical y deslícelo hacia abajo hasta que encaje.



Suba la Plataforma de acoplamiento hasta colocarla en posición horizontal.



Presiónela hacia abajo, hacia el Panel posterior, hasta que quede fija.

Plegar el Speech Dock



Eleve suavemente la Plataforma de acoplamiento aproximadamente un centímetro para desbloquearla.



Coloque la Plataforma de acoplamiento en posición vertical.



Sostenga el Panel posterior y la Plataforma de acoplamiento con una mano y elévelos suavemente un centímetro aproximadamente para desbloquearlos.



Bájelos presionando la plataforma de acoplamiento contra el Panel posterior para que formen un paquete compacto.

Utilizar Compact 6 HD con el Speech Dock



Coloque el Speech Dock frente a usted, con el Panel posterior hacia atrás.



Deposite encima el Compact 6 HD con la pantalla mirando hacia arriba.



Si la cámara y las luces de Compact 6 HD Speech están alineadas con la ranura de la parte superior, significa que el dispositivo está colocado correctamente.



El botón de Escanear (de color blanco) y el conector USB deberán estar mirando hacia usted.

Colocar los documentos



Coloque el documento en orientación vertical.

Alinee la esquina inferior izquierda del documento con la esquina inferior izquierda de la Base.

El documento deberá estar plano sobre la Base, sin ocupar la parte de la Base que forma ángulo hacia arriba.

Compact 6 HD Speech puede capturar una página entera en posición vertical si esta está colocada correctamente.

Conectar los cables



Inserte el cable USB de la Plataforma de acoplamiento en el puerto USB de Compact 6 HD Speech para cargar el dispositivo y conectar el altavoz.



Conecte el cargador USB del Panel posterior a la red eléctrica.

Carga y audio

Cuando el Botón de Audio está encendido y el Cable de Audio está conectado, el audio se activa y el sonido se transmite por el altavoz.

Cuando se apaga el altavoz, Compact 6 HD Speech se carga.

Compact 6 HD Speech no carga cuando el altavoz está encendido.

Precauciones

Optelec no se hace responsable de cualquier uso que se haga de este dispositivo que no se haya descrito en este manual. Conserve este manual como referencia.

- Limpie el Speech Dock únicamente con un paño suave.
- Evite una limpieza agresiva y los limpiadores abrasivos.
- No coloque el Speech Dock en una superficie inestable.
- No use ni guarde el Speech Dock en ambientes húmedos ni calientes.
- No use ni guarde el Speech Dock a una temperatura inferior a 0° o superior a 40°.
- No exponga el Speech Dock a calor excesivo ni a luz solar directa.
- No utilice el Speech Dock dentro del agua.
- Evite el contacto con líquidos corrosivos.
- Evite los golpes bruscos, y no arroje ni deje caer el Speech Dock.
- Para cargar el Speech Dock, utilice únicamente el cargador del Compact 6 HD

Riesgos y efectos secundarios: No se conocen

Especificaciones

- Diseño plegable – para un almacenado y transporte compactos
- Dimensiones en posición plegada: 375 x 124 x 44 mm / 14.8 x 4.9 x 1.7 pulgadas
- Dimensiones en posición desplegada: 370 x 124 x 365 mm / 14.6 x 4.9 x 14.4 pulgadas
- Peso: 1.28 kg / 45.2 onzas