


Introducción

Wear, el accesorio plegable para Compact 6 HD convierte este ampliador de vídeo en una solución portátil y manos libres.

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Banda frontal | 6. Panel frontal |
| 2. Soporte para la parte superior de la cabeza | 7. Soporte |
| 3. Banda para la nuca | 8. Botón de desbloqueo |
| 4. Soporte para la nuca | 9. Laterales |
| 5. Bandas laterales | 10. Acolchado para la cara |

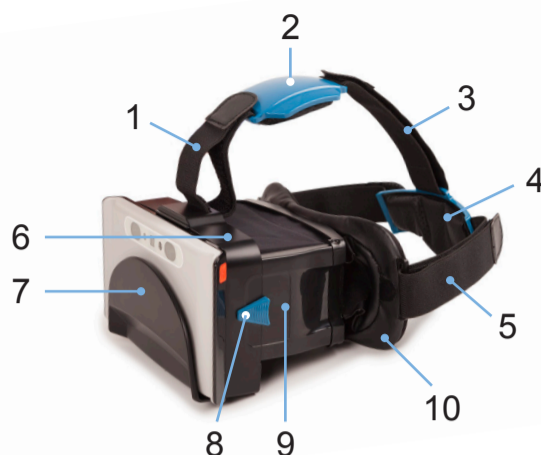

Desplegar el Wear



Sostenga el acolchado para la cara con una mano y el panel frontal con la otra. Despliegue el Wear de forma que los laterales queden en paralelo.

Coloque la parte posterior de los laterales en la posición correcta abriéndolos hasta que hagan clic y queden bloqueados. Cuando el Wear esté firme, significará que los laterales están bloqueados.

Plegar el Wear



Desbloquee a un tiempo los dos laterales presionando el botón triangular en la dirección de la flecha y empújelos hacia adentro de forma que queden simétricos.

Deslice el almohadillado para la cara hacia el panel frontal para plegar el Wear, y doble primero el soporte para la parte superior de la cabeza y a continuación el soporte para la nuca.

Insertar Compact 6 HD en Wear



Deslice el Compact 6 HD en el soporte, con la pantalla mirando hacia el panel frontal y la cámara mirando hacia afuera.

El dispositivo se encuentra en la posición correcta cuando está colocado en el soporte de forma simétrica y la parte superior del Compact está alineada con la parte superior del panel frontal.

Cubrir la parte inferior del Wear



Si desea bloquear la luz que viene de abajo, puede utilizar la cubierta que se suministra con el equipo. Dicha cubierta, con velcro adhesivo, se adhiere a la parte inferior de los laterales.

Dé la vuelta al dispositivo y adhiera la cubierta a los laterales. Asegúrese de que esta cubre la parte inferior y queda firme.

Montaje sobre la cabeza



Afloje las bandas lo suficiente.



Ajuste la banda para la nuca hasta dejarla en una posición cómoda.



Ajuste las bandas laterales hasta que la posición le resulte cómoda.




Ajuste la banda frontal para finalizar el montaje y equilibrar el peso.

Usar el Wear con gafas

El Wear para Compact 6 HD puede utilizarse con gafas graduadas. Si la montura de las gafas no es gruesa, el Wear puede llevarse encima de las gafas.

Sin embargo, si la montura es gruesa, deberá dar la vuelta a las gafas e introducir las patillas por las aberturas superiores del acolchado para la cara. Cuando las patillas estén totalmente introducidas en las aberturas, podrá devolver las gafas a la posición correcta. Colóquese las gafas y el Wear sobre la cabeza. Las patillas quedarán por fuera del Wear y no reposarán en sus orejas. De esta forma podrá llevar las gafas de forma cómoda.

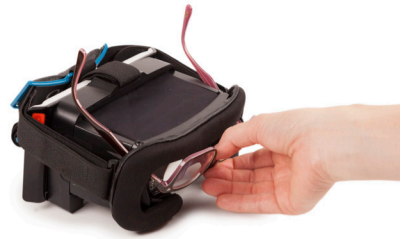

Visión periférica

Para disponer de visión periférica, abra los dos laterales del acolchado para la cara. Para fijarlos, dóblelos sobre la tira de velcro del antifaz. Los laterales del antifaz quedarán abiertos, lo que le permitirá ver el entorno mientras utiliza Wear.



Specifications

- Ampliación adicional a 6x
- Dos lentes prismáticas esféricas
- Campo visual horizontal 90° y vertical 50°
- Dispositivo plegable – para un mejor almacenamiento y transporte
- Acceso a la pantalla táctil para manejar el Compact 6 HD
- Dimensiones plegado 200x100x50mm / 7.9 x 3.9 x 2 pulgadas
- Peso 230 gramos / 8.1 onzas (sin el Compact 6 HD)

Precauciones

Precauciones de seguridad: Para evitar lesiones o problemas de cualquier tipo, tenga en cuenta lo siguiente antes de utilizar Compact 6 HD Wear:

- **No camine, corra ni conduzca, ni realice actividades en movimiento mientras utiliza Compact 6 HD Wear.**
- No deje el dispositivo directamente a la luz solar las lentes podrían provocar un incendio.
- No utilice Compact 6 HD Wear para mirar directamente al sol
- No utilice Compact 6 HD Wear si siente que le hace daño a la vista.
- Las personas que sufran mareos o desmayos no deberán utilizar este dispositivo.
- Si su percepción espacial cambia tras haber utilizado Compact 6 HD Wear, deberá posponer cualquier actividad que requiera agudeza visual (conducir o trabajar con maquinaria) hasta que su percepción espacial vuelva a la normalidad.
- Regule el brillo de la pantalla hasta que alcance el nivel que más se acomoda a sus necesidades.

Aviso importante: Si bien cuando miramos un objeto en la vida real, giramos ligeramente la cabeza para ver lo que tenemos a nuestro alrededor, la pantalla del Compact 6 HD Wear está estática y tenemos que mover los ojos para ver el entorno. Estos movimientos oculares tienen una amplitud superior a la normal y pueden provocar **fatiga** en los **músculos extrínsecos del globo ocular**.

Como sucede con cualquier otro tipo de ejercicio, el usuario puede sentirse incómodo, pero la fatiga desaparece una vez que los músculos están entrenados. Tenga esto en cuenta si observa que se fatiga tras 30 minutos de uso del dispositivo. En último término, los músculos oculares se fortalecerán, lo cual puede resultar beneficioso para los ojos.

Protección y mantenimiento de la lente

Wear viene con unos protectores para la lente preinstalados de fábrica que deben retirarse antes de utilizar el dispositivo.



Mantenga las lentes limpias y evite que sufran arañazos. Si las lentes se ensucian o presentan vaho, elimine primero las partículas que podrían rayarlas y límpielas con una gamuza. Para una mejor limpieza, puede utilizar agua jabonosa pero **nunca** alcohol, acetona u otro producto químico.